


## Niro-Steinfängerkorbchen

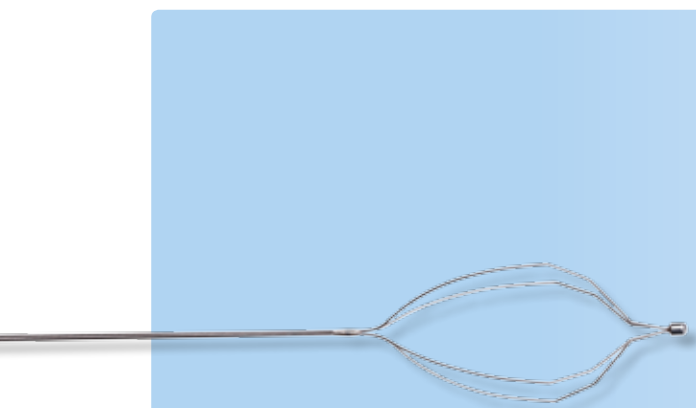

NiRo 4 (6) - DØ - KØ

### Konstruktion

Beim neuen Niro-Steinfängerkorbchen sind alle Übergänge gelötet, welches eine dauerhafte und feste Verbindung gewährleistet, die das Korbchen lithotripsiefähig macht.

### Erläuterungen

DØ- Drahtdurchmesser  
 KØ- Korbdurchmesser  
 (20, 25, 30, 35 mm)

### Technische Daten

#### Korb

4 (Standard) bzw. 6 Edelstahldrahtseile zusammengefasst in einem gedrehten Edelstahlkopf.

#### Zugseil

aus einer Edelstahllitze. Nach Bedarf kann eine Zugstange aus Edelstahl angebracht werden.

#### Kundenwünsche

Neben unseren Standards fertigen wir auch Niro-Steinfängerkorbchen nach Ihren Vorgaben und Wünschen.